

AnnoTek

LC1300B

چارت بینایی سنجی

LED Vision Chart

پرتو صنعت پیرامون

تولید کننده تجهیزات پیشرفته چشم پزشکی

LED Vision Chart



Piramoon Raditech Company

AnnoTek

چارت بینایی سنجی ال ای دی

تنظیم فاصله (Set Distance)

در این سیستم امکان تنظیم فاصله بیمار تا چارت از سه متر تا شش متر با پلکان نیم متری وجود دارد .
این تنظیم در حافظه دستگاه باقی می ماند .

کم بینایی (Low Vision)

برای بیماران کم بینا یک حالت ایجاد شده است که در آن ردیفهای 0/05 و 0/075 به آن اضافه می گردد .

سیستم تلویزیون (Optional)

این سیستم ، امکان استفاده از چارت به عنوان تلویزیون را فراهم می کند .

سیستم تلویزیون در صورت درخواست کاربر (Optional) روی چارت نصب می شود .

سیستم USB (Optional)


چنانچه دستگاه شما دارای سیستم تلویزیون باشد ، می توانید به آن سیستم USB را نیز اضافه کرده و با استفاده از فلش مموری فایل های صوتی و تصویری را پخش کرده و همچنین عکسها را نمایش دهید .

ریموت کنترل (Remote)

یکی از بهترین مزایای این چارت داشتن ریموت کنترل ساده و سبک با تعداد کلید کم که کارکرد آسان با آن را برای کاربر فراهم می کند .
همچنین کلیدهای سیلیکونی این ریموت دارای ده میلیون بار ضمانت است .

نشانه گذاری

در نمایش سطری امکان نشانه گذاری زیر اپتوتایپها بصورت فلش وجود دارد .

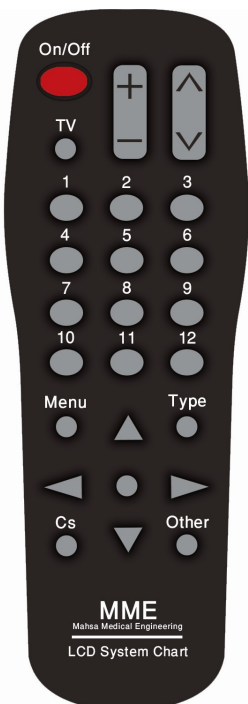

صفحه نمایش (Display)

صفحه نمایش اولترا ال ای دی استاندارد هجده اینچی با رزولوشن و کنتراست بالا .
دارای صفحه نمایشگر مات (Anti Reflex) . منابع نوری خارجی به هیچ وجه در صفحه نمایش منعکس نمی شوند .

دید سه بعدی (Steriopsis)

تعداد شش تصویر سه بعدی در این چارت وجود دارد که از طریق عینک قرمز و سبز قابل مشاهده می باشد .

چارتها (Charts)

تعداد پنج نوع چارت در این دستگاه وجود دارد :

- 1- E Chart
- 2- C Chart
- 3- Numeric Chart
- 4- Alphabet Chart
- 5- Children Chart

چند سطری (Crowding)

در حالت چند سطری ، تعداد چهار سطر در صفحه نمایش داده می شود که امکان نمایش به صورت RED-GREEN نیز وجود دارد .

RED-GREEN

در کلیه صفحات تک ردیفی و چند ردیفی و تجمع کلی ، امکان ایجاد نمایش به صورت RED-GREEN وجود دارد .

صدا (Sound)


این چارت امکان ایجاد صدا در زمان تغییر صفحات را دارد .
ایجاد صدا توسط کاربر می تواند روشن و یا خاموش شود .

حالت تکی (Single)


در این سیستم امکان نمایش حالت تکی به صورت سیستم چارت و پروژکتور تایپ و Crowding Bar وجود دارد .
در حالت سیستم چارت تمام صفحه روشن است ولی در پروژکتور تایپ ، صفحه مشکی و تنها اپتوتایپ روشن است .

Example of Charts


E Chart

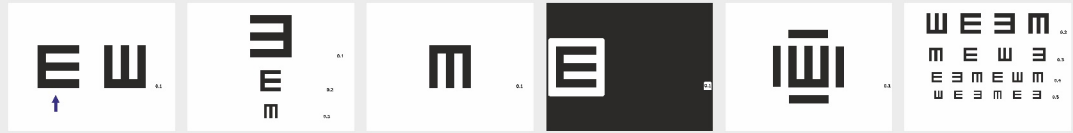

C Chart

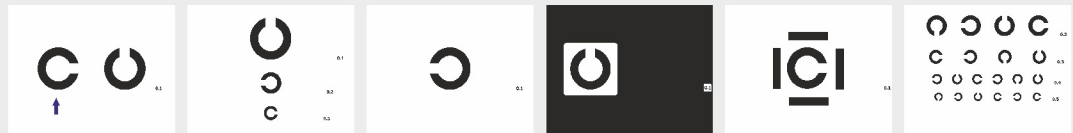

Numeric Chart

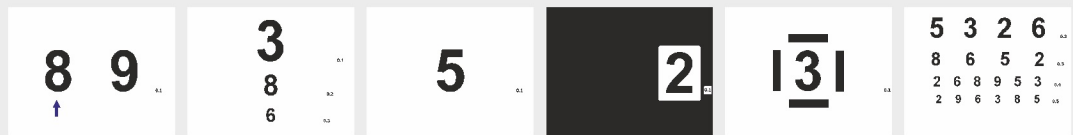

Alphabet Chart




Children Chart



R/G Stereopsis Low Vision



Special Charts

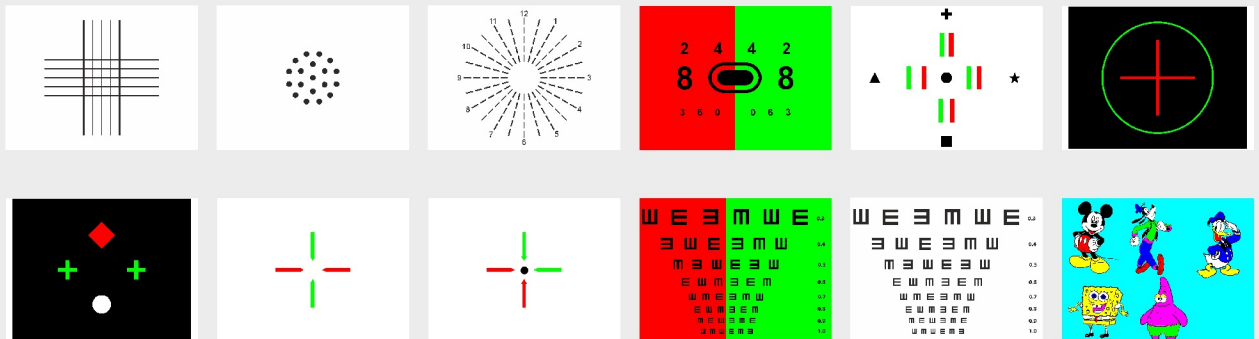

LC1300B


SPECIFICATION

Distance	3 to 6m (50cm step)
Chart Range	Decimal – 0.1~ 1.2
Chart display	Single Letter, Horizontal Line, Vertical Line,
Chart Type	E Chart, C Chart, Numeric Chart, Alphabet Chart
TV Mode	Optional
USB Mode	Optional
Dimension	610mm(W)*60mm(D)*500mm(H)
Weight	5.4 kg
Rated Voltage	100~240V 50/60Hz
Power	22W

ACCESSORIES

- Battery (AA) 2pcs
- Battery(AAA) 2pcs *
- Power Cable 1pc
- Remote Controller 2/set *
- Operator's Manual 1pc
- Screen Cleaner Spray 1pc
- Screen Cleaner Tissue 1pc
- Wall Screws 5pcs

*This Accessories are with TV Option

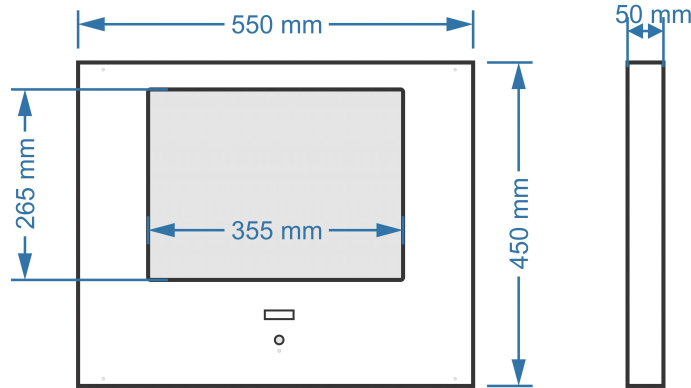

AnnoTek

Piramoon Raditech Company , AnnoTek , LTD

Address : No. 69/1 , Nasserin 6 , Ahrar St. , Valfajr Blvd , Amirkabir Blvd , Shiraz , Iran
Telephone : +98 71 38332486
Facsimile : +98 71 38328514
Cellphone : +98 9173172101
Email : sales@annotek.de
URL : <http://www.annotek.de>

آدرس : شیراز - بلوار امیرکبیر - بلوار والفجر - خیابان احرار - ناصرتین ۶ - پلاک ۶۹/۱
شرکت پرتو صنعت پیرامون